

Educación Sobre ENFit Para Padres/ Personas a Cargo de Cuidado

Tubos/ sondas de alimentación de perfil bajo (Mini One y Mic-key):	Las sondas de alimentación de perfil bajo no están cambiando, sin embargo, las extensiones ahora están disponibles con adaptadores ENFit.
Tubos PEG y G/J largos:	Si bien CHHC no proporciona estos tubos, se verán afectados por el cambio ENFit. Hable con su médico sobre la transición de su niño a ENFit. CHHC seguirá proporcionándole suministros compatibles con la sonda de alimentación de su niño.
Sondas/ tubos nasogástricos (NG):	CHHC ahora está surtiendo sondas nasogástricas ENFit. Si su niño tiene una sonda NG con frenillo sin conexiones ENFit, CHHC seguirá proporcionándole suministros compatibles con la sonda de alimentación de su niño.
Bomba de alimentación y bolsas de gravedad:	Retire el adaptador temporal ENFit blanco adjunto y tírelo a la basura. Gire la conexión ENFit en la conexión ENFit del tubo de alimentación o extensión.
Jeringas:	Se necesitan jeringas ENFit para acceder a los dispositivos de alimentación ENFit. CHHC proporcionará jeringas adicionales en una variedad de tamaños durante nuestro período de transición.
Usando las jeringas con las conexiones ENFit:	Conecte la jeringa dándole vuelta a la jeringa ENFit en el tubo de alimentación/ tubo de extensión de su niño. Empuje lentamente o proporcione la alimentación vía gravedad con la jeringa como lo haría normalmente.


ENFit Procedimientos de limpieza

Tubos de alimentación con conectores ENFit machos

(por ej., tubos nasogástricos, transpilóricos, orogástricos, de gastrostomía endoscópica percutánea y otros dispositivos ENFit)

Consejos para mantener limpios los puertos de los tubos de alimentación ENFit. ¡Inspeccione antes de conectar!

- **Juegos de alimentación de cebado** - Detenga el cebado antes de que el líquido alcance el final del tubo.
- **Preparación de jeringuilla de ENFit** - Limpie la medicación y la nutrición de la punta y las roscas externas; mantenga los líquidos fuera del espacio muerto antes de conectar al tubo de alimentación.

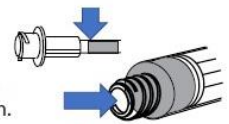

Para obtener los mejores resultados, siga estas instrucciones para limpiar los tubos al menos una vez al día o siempre que haya material visible.

Suministros y términos para la limpieza de tubos

Taza de agua estéril o limpia del grifo Jeringuilla Gasa Cepillo* o herramienta específica de limpieza ENFit tubo de alimentación ENFit

Nota: Use un cepillo desechable o siga las instrucciones del fabricante si utiliza el cepillo de limpieza específico de ENFit.

1 Lávese las manos con jabón y agua o use guantes. Enjuague el cepillo con agua del grifo.

2 Llene la jeringuilla con agua.

3 Tape el agujero central del puerto del tubo de alimentación con las cerdas del cepillo. Enjuague fuertemente el foso con agua.

4 Gire el cepillo en el fondo del foso.

5 Enjuague la tapa con agua limpia del grifo.

6 Inserte las cerdas en la tapa del tubo de alimentación y gire el cepillo en la tapa para limpiarla.

7 Limpie el puerto y la tapa del tubo de alimentación con gasa. Limpie los suministros y déjelos que sequen al aire.

Repita los pasos 3 a 6 hasta que la tapa y el tubo estén completamente limpios.

* En algunas jurisdicciones, los cepillos de dientes manuales están regulados como dispositivos médicos diseñados para quitar los escombros de los dientes. Consulte a su proveedor de atención médica con licencia o a su Gerente de Riesgos en relación con el uso recomendado para la limpieza de los puertos de los tubos de alimentación. Deseche los dispositivos de un solo uso según las instrucciones. Procedimientos de limpieza cortesía de Children's Mercy Kansas City.
© GEDSA 2018 ENFit es una marca federalmente registrada de GEDSA.